

Basitleştirilmiş çalışma, hızlı ölçüm ve tıbbi olarak uygun sonuçlar – işte seca mBCA 515.



seca mBCA 515

Teknik bilgiler

- Kapasite: 300 kg
- Taksimat: 50 g < 150 kg > 100 g
- Onay sınıfı: III
- Tıbbi cihaz sınıfı: IIa
- Boyutlar (GxYxD):
976 x 1,251 x 828 mm
- Güç kaynağı: Güç adaptörü
- Görüntüleme tipi: 8.4" dokunmatik
ekran görüntüleme,
360° döndürülebilir
- Arayüzler: seca 360° wireless
teknoloji, USB 2.0, Eternet
- Ölçüm yöntemi: 8 noktalı
Biyoelektrik Direnç Analizi
- Ölçüm akımı: 100 µA
- Ölçüm süresi, normal yöntem:
maksimum 20 saniye
- Frekanslar: 19

seca mBCA ile ilgili sorularınız için Bizimle
iletişim kurun!

Kimeks Kimyasal Maddeler ve Sağlık Gereçleri Tic. A.Ş.
Abide-i Hürriyet Cad. Gecit Sokak No:6/1 Sisli, İSTANBUL
Tel +902122968460 - Fax: +902122482218 kimeks@kimeks.com - www.kimeks.com

seca | mBCA

İş akışınızı güçlendirir, tedavinizi destekler,
hasta bakımını en iyi şekilde yapmanızı sağlar -
seca mBCA.



Hassas vücut bileşimi değerlendirme –

Klinik olarak kanıtlanmış, tekrarlanabilir, hassas ölçüm.

Obezite için benzersiz tasarım

Aşırı kilolu ve obez hastalar için özel tasarlanmış – seca mBCA.


- Maksimum tartma kapasitesi 300 kg.
- Geniş tartım platformu hastalık derecesinde obez hastalara bile yetecek ölçüm alanını sağlar.
- Alçak platformu sayesinde hastalar kolayca üzerine çıkabilir.
- Elde taşınır elektrotlar ve tartının tutamakları ölçüm hatalarının önüne geçer ve sonuçların her zaman tekrar alınabilmesini sağlar.



Yağı azalt, kası koru

Anlaşılması kolay tek bir grafikte iki değer: Vücut bileşimi tablosu.


- Yeterli aktiviteye sahip obez bir kişinin – artan yağ kütlesi yanında – kas kütlesi artar.
- Kilo azaltma programları genellikle kası korurken yağı azaltmaya odaklanır.
- seca mBCA yağ kütlesini ve yağsız vücut kütlesini anlaşılması kolay tek bir grafikte görüntüler: vücut bileşimi tablosu.

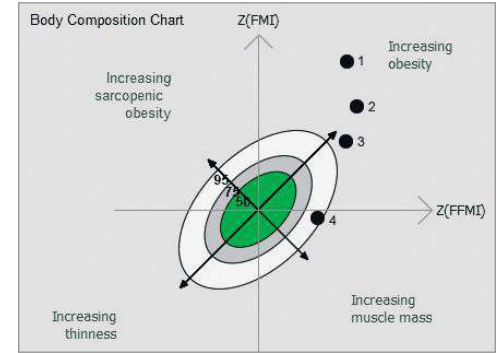

Kısa ölçüm süresi

Hızlı ölçüm kolay uygulamayı sağlar.

- Biyoelektrik direnç ölçümünü yapmak 20 saniyeden az sürer.
- Ölçüm işleminin tamamı (ayakkabıların çıkarılmasından dosyaların yüklenmesine kadar) 5 dakikadan az sürer.
- O yüzden seca mBCA kolaylıkla günlük çalışma rutininizde kullanılabilir.

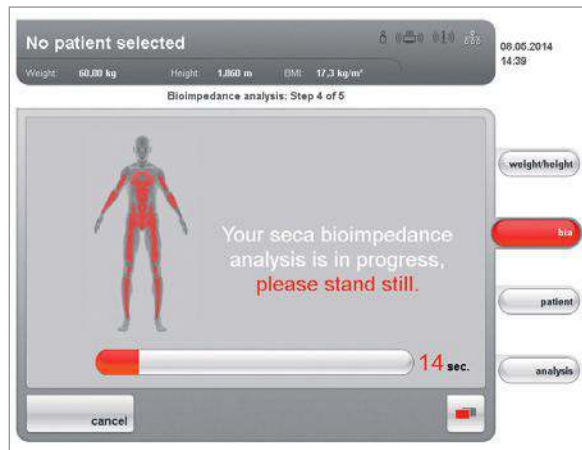

Su tutulmasının miktarını belirlemek



Sadece net bir kavrayış kesin cevabı verir.

- İnsülin direnci olan metabolik, sağlıklı kişiler kilo azalması başladığında genellikle yalnızca su kaybederler.
- Su kaybının ardından genellikle kilonun duraklaması gelir.
- Bu etkileri değerlendirmek için seca mBCA zaman içerisinde meydana gelen su kaybını isabetli olarak ölçer.