

Basitleştirilmiş çalışma, hızlı ölçüm ve tıbbi olarak uygun sonuçlar – işte seca mBCA 515.



seca mBCA 515

Teknik bilgiler

- Kapasite: 300 kg
- Taksimat: 50 g < 150 kg > 100 g
- Onay sınıfı: III
- Tıbbi cihaz sınıfı: IIa
- Boyutlar (GxYxD):
976 x 1,251 x 828 mm
- Güç kaynağı: Güç adaptörü
- Görüntüleme tipi: 8.4" dokunmatik
ekran görüntüleme,
360° döndürülebilir
- Arayüzler: seca 360° wireless
teknoloji, USB 2.0, Eternet
- Ölçüm yöntemi: 8 noktalı
Biyoelektrik Direnç Analizi
- Ölçüm akımı: 100 µA
- Ölçüm süresi, normal yöntem:
maksimum 20 saniye
- Frekanslar: 19

seca mBCA ile ilgili sorularınız için Bizimle
iletişim kurun!

Kimeks Kimyasal Maddeler ve Sağlık Gereçleri Tic. A.Ş.
Abide-i Hürriyet Cad. Gecit Sokak No:6/1 Sisli, İSTANBUL
Tel +902122968460 - Fax: +902122482218 kimeks@kimeks.com - www.kimeks.com

seca | mBCA

Farklı tipte hastalar, tek çözüm –
Seca mBCA.




Hassas vücut bileşimi değerlendirme –

Klinik olarak kanıtlanmış, tekrarlanabilir, hassas ölçüm.

Beslenme bozukluğu değerlendirmesi

mBCA ile kapsamlı değerlendirme.


- Beslenme bozukluğunun değerlendirilmesi giderek önemli rol oynamaktadır.
- Diyabet ve ateryoskleroz işaretleri gösteren, risk altındaki obez hastaların tedavisi.
- Yetersizlik semptomları olan eksik kilolu hastaların tedavisi.
- Kas kütlesi ve metabolizma oranları azalmış normal kilodaki hastaların tedavisi.

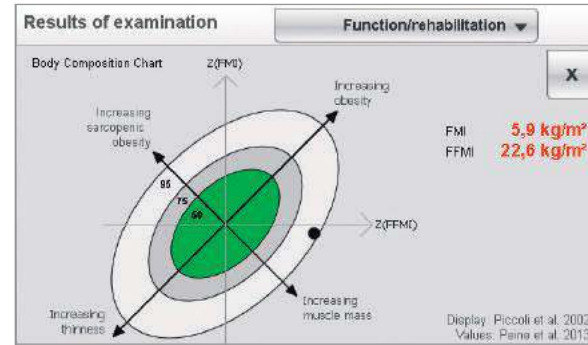

Kas fonksiyonlarını izleme

600'den fazla kas – sayısız uygulama alanı.

- Kas fonksiyonlarının izlenmesi çeşitli uygulama alanları sağlar.
- Diyabetoloji, sporcularda idman yönetimi, rehabilitasyon, fizyoterapi, v.b.
- Bu, ekstremitelerin: kollar, bacaklar ve gövdenin segmental analizi yoluyla gayet kolay yapılır.
- Değerler normal aralıklarla kıysalanır.

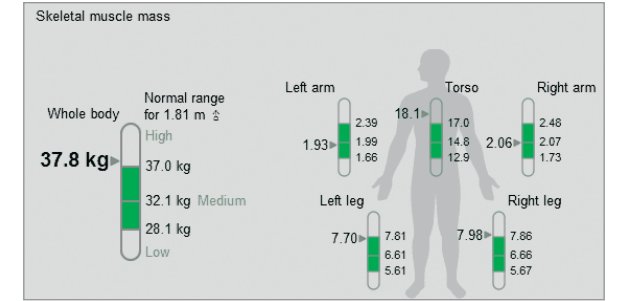



Ödem yönetimi

Su hayattır – fakat çok fazlası ciddi bir risk faktörüdür.

- Vücut suyunun değerlendirilmesi tıbbın pek çok alanında hayati önemdedir.
- Nefroloji, intestinal, hepatorenal ve kardiyak hastalarında özellikle önemlidir.
- Toplam vücut suyunu, ekstraselüler suyu ve su dağılımını izlemek ödemin saptanarak kontrol altına alınmasına yardımcı olur.



Faz açısı

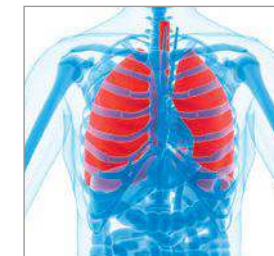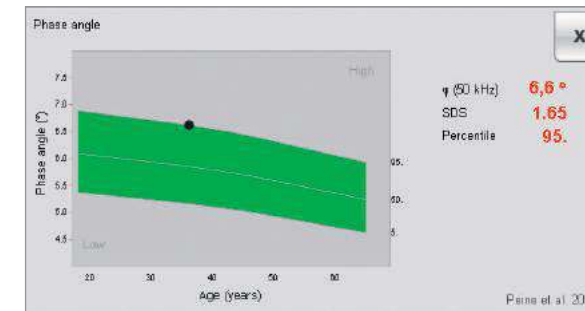

Tek bir hızlı ölçüm – iki hayati değerde cevap.

- Sağlık hakkında bilgi verir.
- Klinik açıdan kötü sayılan beslenmeyi saptamaya yardımcı olur.
- Kanser hastalarını, COPD veya kronik kalp yetmezliği olan hastaları izlemek için idealdir.
- Düşük faz açısı değerleri için gösterge olan farklı teşhisler (yaşa bağlı olarak).